

CIV-Flex™

UNIWERSALNE OSŁONY NA SONDY USG



Polecane od ponad dwóch dekad osłony CIV-Flex™ firmy CIVCO są teraz dostępne w długościach 61, 91,5 oraz 147 cm. Osłony o przedłużonej długości zapewniają dodatkową sterylną ochronę podczas wykonywania rutynowych procedur punkcji i drenażu. Udoskonalone składanie teleskopowe pozwala na łatwą aplikację żelu, a także łatwe nałożenie osłony na głowicę. Sterylne zestawy zabiegowe ogólnego przeznaczenia obejmują osłonę głowicy, sterylny pakiet żelu i kolorowe opaski elastyczne. Nie wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego.

Przedstawiciel handlowy:

Tomasz Kodłubaj:
Sebastian Siegmund:
Bartosz Brzek:
Andrzej Poroszewski:
Patrik Zalewski:

telefon:

+48 660 610 312
+48 538 622 072
+48 539 143 408
+48 539 141 638
+48 662 039 787

e-mail:

tomasz.kodlubaj@e-mds.pl
sebastian.siegmund@e-mds.pl
bartosz.brzek@e-mds.pl
andrzej.poroszewski@e-mds.pl
patrik.zalewski@e-mds.pl

MDS
cardio

DYSTRYBUCJA w Polsce: MDS Cardio Sp. z o.o.;
02-858 Warszawa,
ul. Transportowców 11; tel. 22 644 80 62;
e-mail: mds@e-mds.pl

Producent:

CIVCO Medical Solutions
102 First Street South
Iowa 52247-9589, USA



ULTRA-PRO II™

PROWADNICE IGIEŁ W PROCEDURACH BIOPSJI POD KONTROLĄ USG



Prowadnica igły biopsyjnej **CIVCO ULTRA-PRO II™** to system biopsyjny gwarantujący pozycjonowanie igły w płaszczyźnie wiązki ultradźwiękowej sondy i zapewniający pewne wyniki kliniczne podczas interwencji pod kontrolą usg dla zmian zarówno głęboko osadzonych, jak i powierzchownych.

System CIVCO ULTRA-PRO II™ to:

- skrócenie czasu zabiegu
- powtarzalna technika zabiegu
- możliwość wstępnego zaplanowania ścieżki wkłucia igły
- przewidywalna trajektoria i ścieżka wkłucia dla zmian głębokich
- zwiększenie widoczności wkłuwanej igły
- pewne wyniki kliniczne
- zmienne kąty (do 4 w zależności od sondy) wkucia igły, 10 rozmiarów igieł
- bezpieczne, przyjazne dla użytkownika wprowadzanie igły
- możliwość usunięcia sondy z prowadnicą po wkłuciu igły
- sterylne, gotowe do użytku zestawy zabiegowe

System CIVCO Ultra-Pro II™ składa się z dedykowanej do wybranej głowicy ultrasonograficznej, podlegającej sterylizacji obejmującej wielokrotnego użytku. Na obejmie zatrzaskiwana jest sterylna, jednorazowego użytku prowadnica igły biopsyjnej. W prowadnicy umieszczamy sterylne, jednorazowego użytku wkłady dopasowane do rozmiaru używanej igły.



Przystawki są przystosowane do sond wszystkich czołowych producentów ultrasonografów: **Canon, Fujifilm, GE Healthcare, Philips, B&K, Samsung, Siemens, Mindray, SonoSite, Esaote, Supersonic.** Przystawka **CIVCO ULTRA - PRO II™** zapewnia różne kąty prowadzenia igły. Prowadnica posiada wygodny spust ułatwiający szybkie zwolnienie blokady i sprawne odłączenie igły od głowicy. Czytelne oznaczenie jednorazowych wkładów prowadnicy ułatwia w zaciemnionym gabinecie USG identyfikację i wybór odpowiedniego rozmiaru. Wkłady prowadnicy igły biopsyjnej posiadają ergonomicznie ukształtowane wejście ułatwiające wprowadzanie igły.

Wkłady przewidziane są do igieł o rozmiarach 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 23GA oraz 8,5FR.


„Krótszy czas zabiegu biopsji pod kontrolą USG będzie skorelowany z mniejszą liczbą manipulacji igłą, a tym samym mniejszym urazem tkanek i mniejszym dyskomfortem pacjenta.”

➤ **ZESTAW STARTOWY DO BIOPSJI CIVCO Ultra-Pro II™** do użytku z wybraną głowicą USG. Każdy zestaw startowy zawiera wielorazowego użytku obejmę sondy ultrasonograficznej i sterylny zestaw pozwalający na przeprowadzenie 5 procedur biopsji. Każdy zestaw składa się z:

- wielokątowej przystawki wielorazowego użytku do sondy USG - **1 sztuka**
- sterylnych prowadnic igły biopsyjnej - **5 sztuk**
- jednorazowych wkładów prowadnicy, rozmiar 14-23G (niedostępne 19G) oraz 8.5Fr - **5 kompletów**
- sterylnych osłon sondy i przewodu sondy ultrasonograficznej CIV-Flex (3D) - **5 sztuk**
- żelu USG - **5 saszetek**
- elastycznych opasek mocujących - **10 sztuk**

➤ **ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY DO BIOPSJI CIVCO Ultra-Pro II™** jednorazowy, sterylny zestaw do wykonania 24 procedur zawierający:

- wkłady prowadnic Ultra-Pro II™ - **24 sztuki**
- osłony sondy i przewodu sondy ultrasonograficznej CIV-Flex (3D) - **24 sztuki**
- żel USG - **24 saszetki**
- elastyczne opaski mocujące - **48 sztuk**
- numer katalogowy zestawu uzależniony od rodzaju sondy (wielkość czoła i długość przewodu):

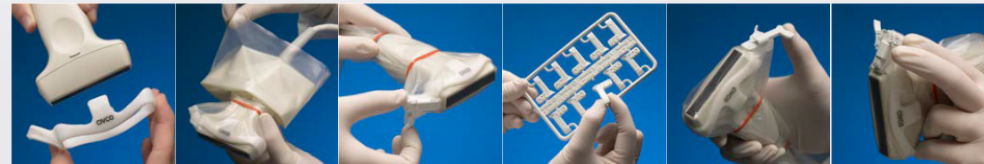

Zapobieganie zakażeniom:

Osłony sondy i sprzętu chronią przed zakażeniem krzyżowym, zapewniając bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

Precyzja:

Prowadnice igły zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia zmienności techniki, aby szybko zapewnić dokładność i stabilność procedur nakłuwania.

Pozycjonowanie:

Prowadnice igły zapewniają dokładne pozycjonowanie podczas nakłucia, zapewniając kliniczną pewność w trafieniu w cel.

Szybsze i dokładniejsze pozycjonowanie igieł:

Badania wykazują, że zastosowanie nawigacji ultrasonograficznej w czasie rzeczywistym poprawia wskaźniki powodzenia za pierwszym razem. Dla klinicystów oznacza to zwiększoną wydajność i większą przepustowość pacjentów. Dzięki zastosowaniu ultrasonograficznych prowadnic igły, klinicyści mają większą pewność kliniczną w szybkim znajdowaniu docelowej anatomii, pozwalając użytkownikom skupić się na opiece nad pacjentem i bezpieczeństwie.