



Igły do biopsji i aspiracji szpiku kostnego






SnareCoil® Igła do biopsji szpiku kostnego

Unikalna, opatentowana igła do biopsji szpiku kostnego SnareCoil® to urządzenie do pobierania próbek, które dostarcza długą, nienaruszoną próbkę.

Innowacyjna konstrukcja SnareCoil®, znajdująca się na końcu igły, owija się wokół próbki, przechwytyując długie, niefragmentowane próbki.

Cewka chwyta próbkę, częściowo ją rozcina i bezpiecznie utrzymuje w igle podczas jej wycofywania.

Działanie to, uruchamiane za pomocą dźwigni na SnareCoil®, eliminuje potrzebę przekręcania lub manipulowania igłą podczas pobierania próbki, upraszczając procedurę biopsji.

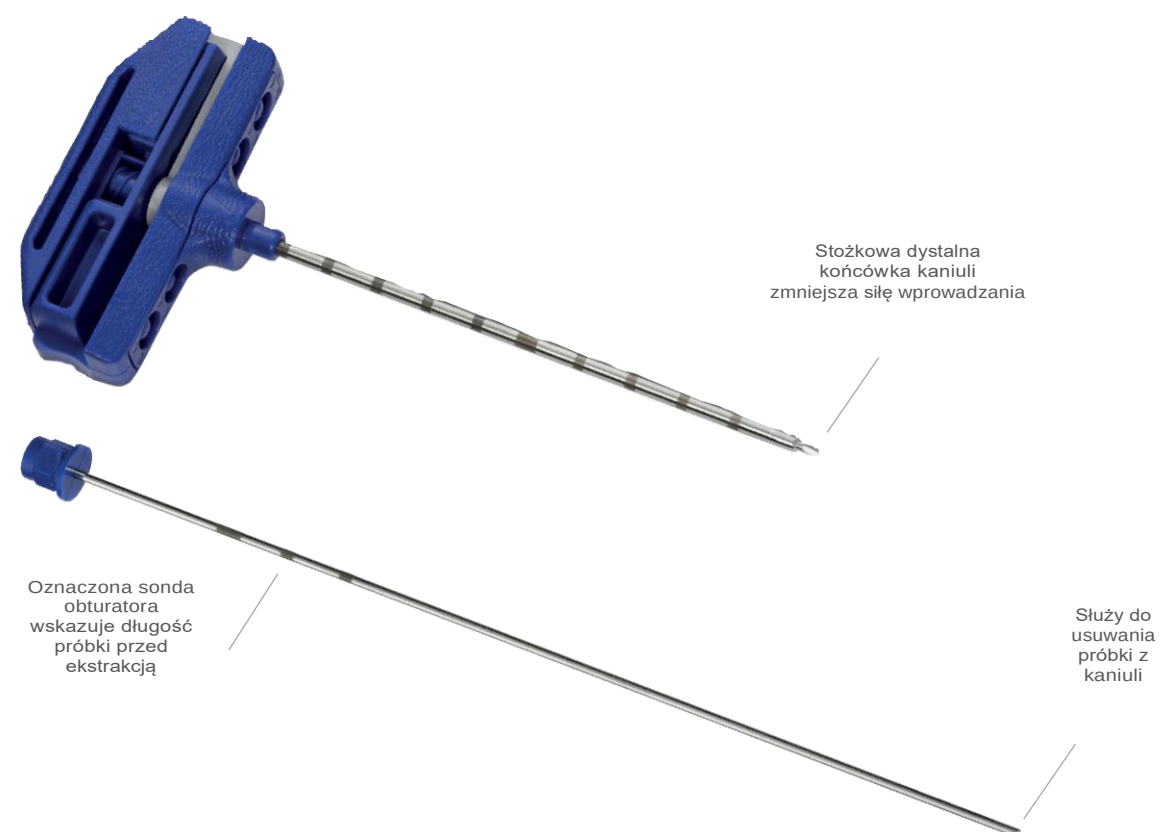

Funkcje:

- Dźwignia blokująca "OPEN" i "CLOSED" przechwytuje i zabezpiecza nienaruszoną próbkę.
- Bardzo ostra końcówka umożliwia łatwą penetrację kory mózgowej
- "Quintuple peaks" na końcówce kaniuli zapewnia doskonałą zdolność rdzeniowania
- Ergonomiczny uchwyt zaprojektowany, aby zminimalizować zmęczenie dłoni i ramion
- Oznaczona sonda do weryfikacji długości próbki przed ekstrakcją
- Prowadnica końcówki sondy zapewnia bezpieczeństwo użytkownika końcowego przed przypadkowym zakłuciem igłą
- Dołączone zabezpieczenie NeedleVISE™ do zabezpieczania ostrych narzędzi po użyciu






Tweezer® Igły do biopsji szpiku kostnego


Igła do biopsji szpiku kostnego Tweezer® zawiera unikalną kaniulę ekstrakcyjną Tweezer®, której celem jest uzyskanie wysokiej jakości próbki szpiku poprzez uwięzienie próbki w igle bez jej uszkodzenia, eliminując w ten sposób bolesną technikę odchyłania igły.

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt "Twist-Lock", w połączeniu z końcówką trzpienia, umożliwia łatwą penetrację twardej kości i utrzymuje zespół uchwytu w stanie nienaruszonym podczas penetracji kości.

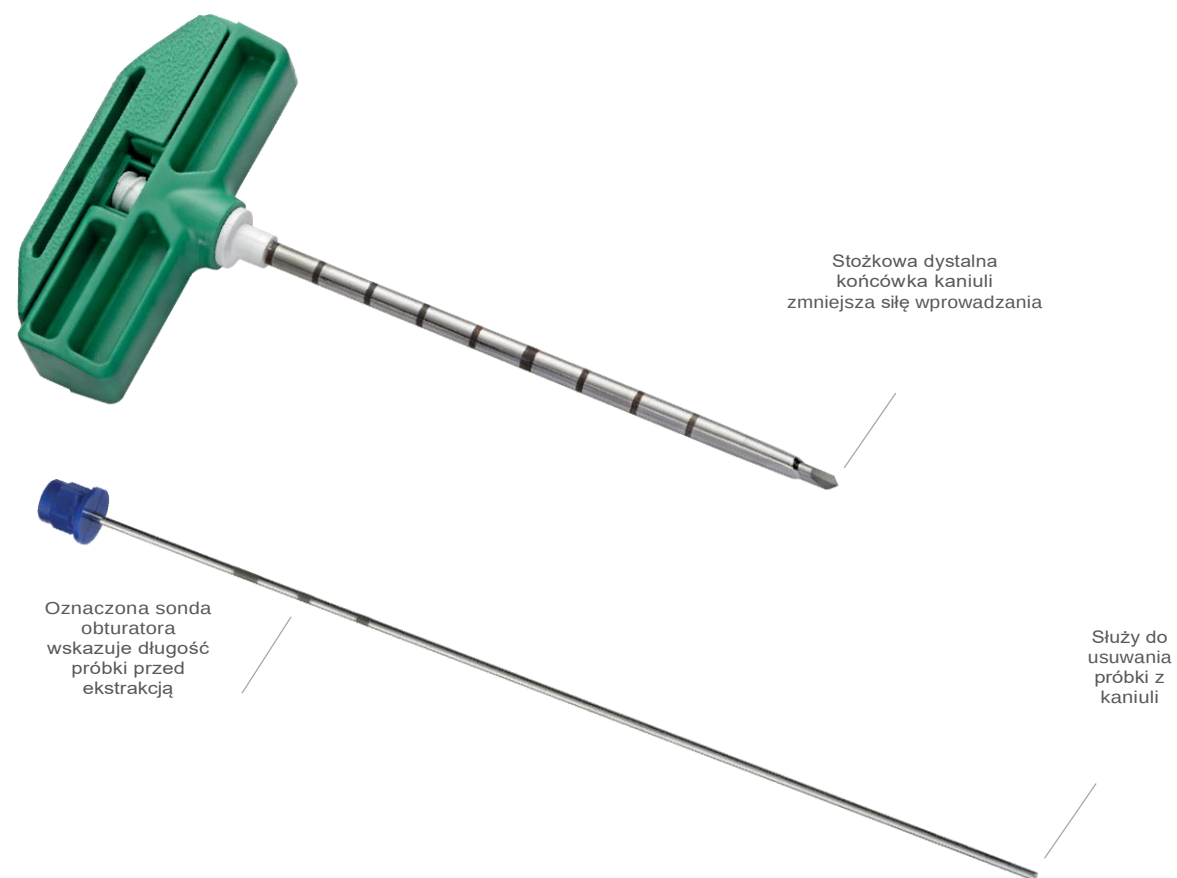

Cechy:

- Bardzo ostry końcówka igły zaprojektowana do szybkiej i łatwej penetracji
- Podwójne krawędzie tnące na zwężającej się dystalnej kaniuli zapewniają doskonałe rdzeniowanie
- Unikalna kaniula ekstrakcyjna przechwytuje i zatrzymuje próbki szpiku
- Oznaczenia centymetrowe dla szacunkowej głębokości penetracji
- Ergonomiczny uchwyt zaprojektowany w celu zminimalizowania zmęczenia dłoni i ramion
- Oznaczona sonda do weryfikacji długości próbki przed ekstrakcją
- Dołączone zabezpieczenie NeedleVISE™ do zabezpieczania ostrych narzędzi po użyciu

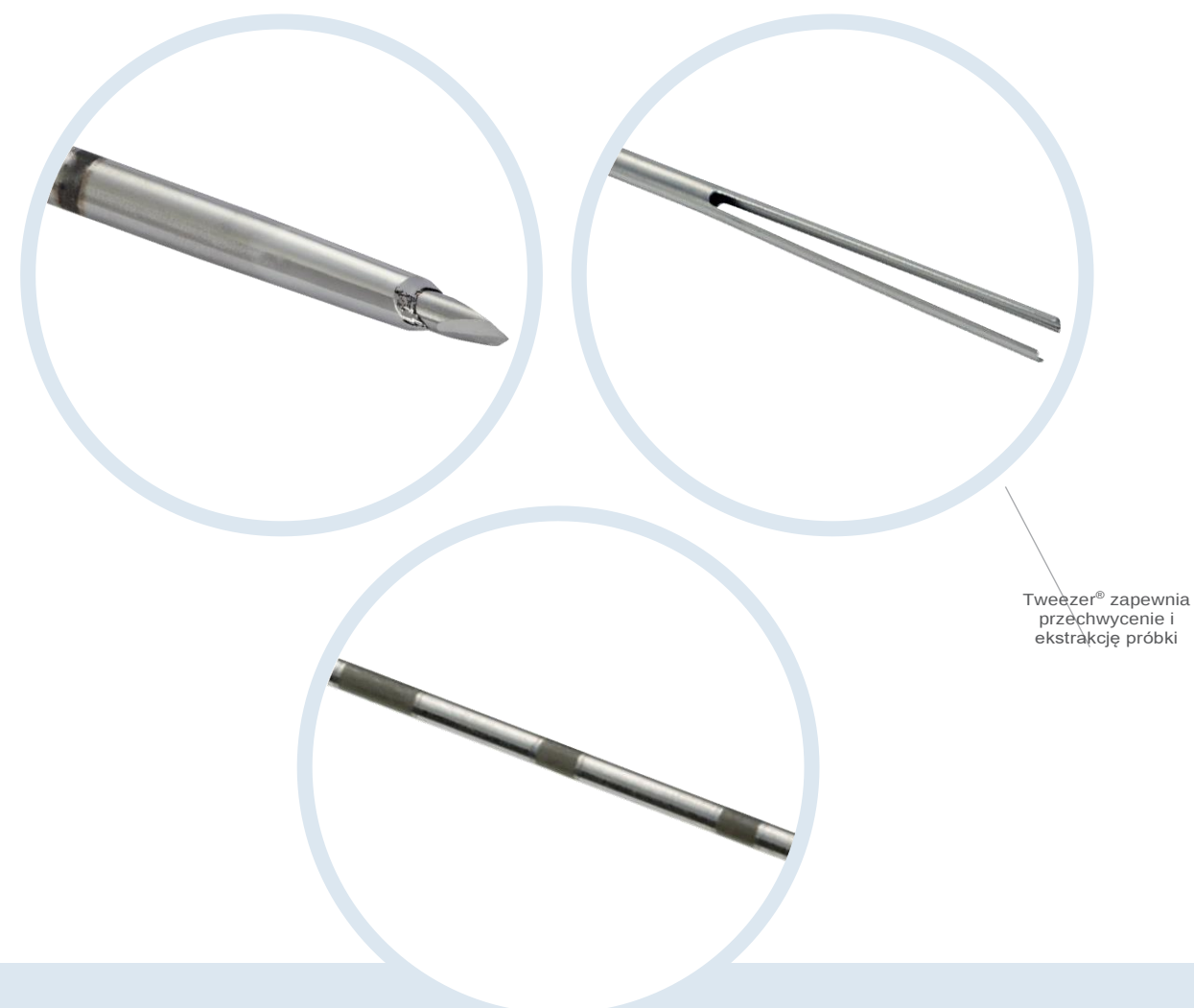



Igła do aspiracji szpiku kostnego

Igła do aspiracji szpiku kostnego ma wyjątkowo ostrą końcówkę i ergonomiczny uchwyt, aby zapewnić wygodę i łatwość użycia podczas wchodzenia do jamy szpikowej.

Igła aspiracyjna jest również wskazana do stosowania w śródkostnych infuzjach płynów i leków.

Cechy:

- Wyjątkowo ostra końcówka umożliwia łatwą penetrację kory mózgowej
- Ergonomiczny uchwyt zaprojektowany w celu zminimalizowania zmęczenia dłoni i ramion
- Regulowany, zdejmowany ogranicznik igły bezpiecznie kontroluje głębokość penetracji
- Złącze Luer Lock na uchwycie do bezpiecznego mocowania strzykawki



Igła do biopsji szpiku kostnego SnareCoil®

Nr ref.	G	Diugość	Pudełko
RBN-84	8G	4 cale (10 cm)	10
RBN-86	8G	6 cali (15 cm)	10
RBN-114S	11G	4 cale (10 cm)	10
RBN-116	11G	6 cali (15 cm)	10
RBN-133	13G	3 cale (8 cm)	10

Tweezer® Igła do biopsji szpiku kostnego

Nr ref.	G	Diugość	Pudełko
RTN-84-T	8G	4 cale (10 cm)	10
RTN-86-T	8G	6 cali (15 cm)	10
RTN-114-T	11G	4 cale (10 cm)	10
RTN-116-T	11G	6 cali (15 cm)	10

Igła do aspiracji szpiku kostnego

Nr ref.	G	Diugość	Pudełko
4029AK.15.70	15G	2,8 cala (7 cm)	15
4029AK.15.100	15G	4 cale (10 cm)	15





mermaid medical®

www.mermaidmedical.com

Dystrybucja w Polsce:



MDS Cardio Sp. z o.o.

02-858 Warszawa, ul Transportowców 11

Tel: 22-644-80-62 fax: 22-644-81-89

www.e-mds.pl