



## Curaway™

# Drut do lokalizacji zmian w piersiach



### System repositionowalny

Druty do lokalizacji piersi Curaway™ zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach zarówno radiologów piersi, jak i chirurgów.

Druty mają końcówkę w kształcie litery Q lub Y, aby zapewnić doskonałe zakotwiczenie w tkance piersi, od całkowicie tłuszczowej do bardzo gęstej.


Brak migracji i penetracji po umieszczeniu zapewnia optymalne prowadzenie dla chirurgów podczas operacji oszczędzającej piersi i promuje końcowy cel, jakim jest estetycznie akceptowalny wynik.

Radiolog może wielokrotnie wycofywać i repositionować mocne i elastyczne druty, aby uzyskać dokładne umiejscowienie. Klips przytrzymujący skórę, który zapobiega penetracji do przodu w tkance podczas transportu pacjenta, jest dostarczany w sterylnym woreczku z wstępnie załadowanym drutem wewnątrz igły.


### Cechy:

- Dwie inteligentne końcówki drutu zapewniają doskonałe zakotwiczenie, zapobiegając migracji drutu.
- Repozycjonowalny, mocny i elastyczny drut sprzyja dokładnemu umieszczeniu drutu.
- Kodowanie kolorami na piaście igły ułatwia identyfikację rozmiaru.
- Oznaczenia centymetrowe na kaniuli zapewniają odniesienie do głębokości wprowadzania.

Drut typu Q

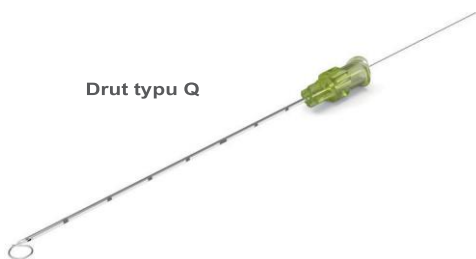

Drut typu Y

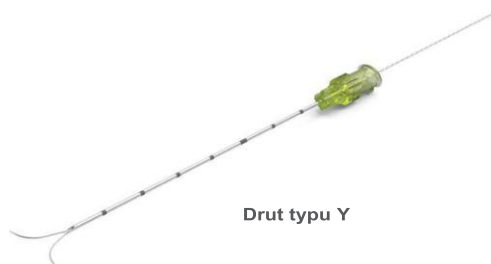

**Drut typu Q**



**Drut typu Y**



### Informacje dotyczące zamawiania

| Nr ref.            | Opis                                  | Typ przewodu | Długość drutu | Rozmiar igły | Ilość/pudełko |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| (GW-Q20-) (50)     | Drut lokalizacyjny<br>Nitinol         | Q            | 15 cm         | 20G x 5 cm   | 10            |
| (GW-Q20-) (77)     | Drut lokalizacyjny<br>Nitinol         | Q            | 17 cm         | 20G x 8 cm   | 10            |
| (GW-Q20-) (107)    | Drut lokalizacyjny<br>Nitinol         | Q            | 20 cm         | 20G x 11 cm  | 10            |
| (GW-Y20-) (57)     | Drut lokalizacyjny<br>Stal nierdzewna | Y            | 15 cm         | 20G x 6 cm   | 10            |
| (GW-Y20-) (77)     | Drut lokalizacyjny<br>Stal nierdzewna | Y            | 17 cm         | 20G x 8 cm   | 10            |
| (GW-Y) (20-) (107) | Drut lokalizacyjny<br>Stal nierdzewna | Y            | 20 cm         | 20G x 11 cm  | 10            |

Dystrybucja w Polsce:



**MDS Cardio Sp. z o.o.**  
02-858 Warszawa, ul Transportowców 11  
Tel: 22-644-80-62 fax: 22-644-81-89  
[www.e-mds.pl](http://www.e-mds.pl)